

Paco – Flow

Set de Succión



Características


- Pieza de mano ergonómica que asegura confort y control.
- El cartucho de filtro de flujo cruzado retiene y recoge fragmentos de hueso, cemento o coágulos de sangre.
- El cartucho de filtro extraíble en el tubo externo multi-perforado elimina los bloqueos de residuos.
- Reducir el riesgo de daño tisular e infecciones postoperatorias y complicaciones.
- El cambio rápido del filtro mientras se mantiene la succión garantiza una succión continua.
- La punta reversible y extraíble proporciona una longitud adicional para la aspiración intra-femoral, ya sea para una aspiración tabular o femoral.
- La punta reversible e intercambiable permite la máxima versatilidad y elimina la necesidad de tirar de un segundo dispositivo.
- La punta redondeada con dos ojos asegura una succión efectiva.
- Filtro extra intercambiable para ahorrar tiempo.
- Disponible con puntas de succión de corta o larga para adaptarse a los requisitos individuales.
- Estériles, bolsas individuales con doble envoltura.

Futurimplants, s.l.

C/ Josefina Manresa Quesada, 113 03202 ELCHE (Alicante)

TL: 965423758 / Fax: 965423753

www.futurimplants.com futurimplants@grupo-sr.com

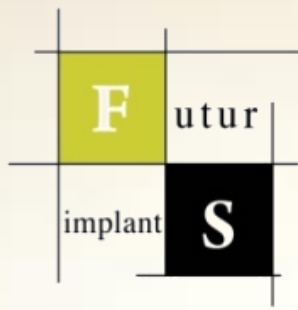

La succión/aspiración inadecuada es un problema muy común en cualquier procedimiento quirúrgico y sobre todo en la cirugía de reemplazo articular parcial o total.

La causa principal son los fragmentos de hueso atrapados, el cemento, los coágulos de sangre, restos de partes blandas y otros desechos que pueden causar el bloqueo del terminal, tubo de aspiración, etc. creando inconvenientes durante la cirugía, estrés adicional y habitualmente necesitando abrir nuevos sistemas de aspiración creando un sobre coste.

El conjunto de succión ortopédico Paco-Flow es un dispositivo especial de succión para procedimientos ortopédicos, cirugía general, cirugía oncológica, etc. que permite la eliminación eficiente de fragmentos de huesos y restos sin el problema adicional de obstrucciones para ayudar a que los procedimientos se realicen sin problemas y de manera adecuada. El cartucho de filtro de alta capacidad de diseño único ubicado dentro de la pieza de mano transparente garantiza un flujo libre incluso en los casos más difíciles.

Este sistema se compone de los siguientes artículos dentro de una misma referencia QP09124

- Tubo de aspiración
- Pieza de mano (terminal)
- 2 filtros
- 1 terminal angulado corto
- 1 terminal angulado largo